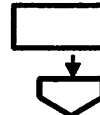


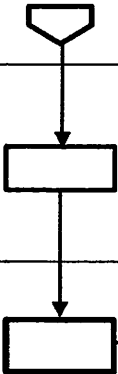
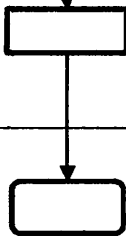


RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Nomor SOP	000.8.3.3/270 / RSUKT - CSSD / 2024
Tgl Pembuatan	08 Mei 2019
Tgl Revisi	01 September 2024
Tgl Pengesahan	01 September 2024
Disahkan oleh	Direktur RSU Kota Tarakan, dr. Joko Hariyanto, M.M Pembina Tk. I / IVb NIP. 197611172005021002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nama SOP PELAYANAN STERILISASI LINEN DENGAN AUTOKLAF

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 445/105/RSUKT/2019 tentang Pedoman Pelayanan CSSD	1. D3 Farmasi 2. SMK Sederajat
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Semua unit yang memerlukan proses sterilisasi	1. Mesin washer 2. Mesin outoclav steam dan plasma 3. Sealing mesin 4. Drying kabinet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Mesin mengalami kegagalan steril karena kurangnya tekanan air 2. Terjadinya kebocoran terhadap gasket pada mesin 3. Jika terjadi masalah maka berkoordinasi dengan teknisi ATEM IPSRS	1. Pencatatan menggunakan aplikasi google form

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PETUGAS LOUNDRY	Petugas CSSD	Petugas Sterilisasi	Petugas ruangan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Petugas Laundry mengisi formulir penyerahan barang belum steril.					Blangko Penerimaan Dari Laundry	13 Menit	Blangko Penerimaan dari Laundry	
2.	Petugas CSSD menghitung dan menerima barang yang akan disterilkan.					Blangko Penerimaan Dari Laundry	6 Menit	barang yang akan disterilkan.	
3.	Petugas CSSD menge- pack/ menge-set Linen yang diterima					1. barang yang akan disterilkan. 2. Pouches dan Wrapping Paper	16 Menit	Pouches dan Wrapping Paper	
4.	Jika lengkap, Petugas CSSD mengemas, labelisasi, dan indikatorisasi linen tersebut.					1. Pouches dan Wrapping Paper 2. Cealing Mesin, Label Gun, Indikator External dan Internal		Cealing Mesin, Label Gun, Indikator External dan Internal	
5.	Petugas sterilisasi melakukan sterilisasi produk tersebut.					1. Cealing Mesin, Label Gun, Indikator External dan Internal 2. Autoclav Steam	1 Jam 30 Menit	Autoclav Steam	
6.	Petugas CSSD melakukan penyimpanan linen yang telah disterilkan.					1. Autoclav Steam 2. Troli Linen dan Rak Instrumen dan Linen	20 Menit	Troli Linen dan Rak Instrumen dan Linen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
7.	Petugas CSSD memantau hasil sterilisasi dengan melihat hasil indikator Autoklaf (internal, eksternal, attest, Bowie Dick test)					1. Troli Linen dan Rak Instrumen dan Linen 2. Indikator Bakteri, Bowie Dick Tes	10 Menit	Indikator Bakteri, Bowie Dick Tes	
8.	Jika baik dan steril, Petugas CSSD melakukan pendistribusian linen steril.					1. Indikator Bakteri, Bowie Dick Tes 2. Box Container Steril		Box Container Steril	
9.	Petugas ruangan menerima dan membawa linen steril dengan wadah barang steril dan tidak melewati lift barang.					1. Box Container Steril 2. aplikasi google form	5 Menit	aplikasi google form	
10.	Petugas ruangan melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatan ini.					aplikasi google form	3 Menit	Laporan	